


Instrução de uso:

1. Limpe a ferida e a pele circundante de acordo com os procedimentos estabelecidos pela prática clínica;



2. Seque bem a pele circundante;

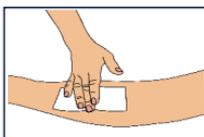

3. O Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril Wound Care F deve sobrepor a ferida em pelo menos 1-2cm, de modo a proteger a pele circundante da maceração e garantir a correta fixação do curativo;



4. Aplique o lado aderente na ferida permitindo a fixação inicial do curativo;



5. Evite a formação de pregas ao retirar cuidadosamente as películas protetoras. Comece pela parte mais longa. Não estique o curativo durante a aplicação.



O Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril Wound Care F pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição da ferida e da pele circundante ou conforme indicado pela prática clínica.

Composição: Filme de poliuretano semipermeável revestido por um adesivo de poliacrilato associado a uma compressa absorvente de fibras de viscosse e poliéster.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Indicação de uso: O Curativo Filme Pós-Operatório Estéril Wound Care F é um curativo cirúrgico, auto aderente, absorvente, proporciona proteção de feridas com leve ou nenhum exsudato, feridas agudas tais como: feridas cirúrgicas, cortes, abrasões, lacerações, queimaduras, feridas superficiais e de espessura parcial.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível, aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o curativo demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão. A frequência de troca do curativo constantemente deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.

Contraindicações: O Curativo Filme Pós-Operatório Estéril Wound Care F não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com muito exsudato. Contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Dimensões Disponíveis: 7,2cm x 5cm, 10cm x 6cm, 10cm x 8cm, 10cm x 12cm, 10cm x 15cm, 9cm x 9cm, 15,5cm x 8,5cm, 10cm x 20cm, 10cm x 25cm, 10cm x 30cm, 10cm x 35cm. 5,3cm x 7cm, 5,3cm x 8cm, 10cm x 7cm, 10cm x 9cm, 15cm x 9cm, 20cm x 9cm, 25cm x 9cm, 30cm x 9cm.

Validade: 5 anos

Fabricado por: Shanghai Iso Medical Products Co. Ltd
999 Liu Chen Lu Pudong - New Area Shanghai, 201202 - China

Importado por:
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Anvisa n.º: 8003409002

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 76111

