

Suprasorb® X + PHMB

Curativo antimicrobiano HydroBalance



Suprasorb X + PHMB apresenta uma grande eficácia antimicrobiana*. Estudos in vitro demonstraram a liberação muito rápida e quase completa de polihexametileno biguanida (PHMB) do curativo após 24 horas. Dependendo das condições da ferida, os produtos liberam umidade ou absorvem o excesso de exsudato, criando um ambiente úmido na ferida. A troca de curativos é atraumática. O material permite uma fácil adaptação do curativo a qualquer forma ou

profundidade da ferida. Por essa razão, os produtos são particularmente adequados às partes do corpo de difícil tratamento. O curativo foi especialmente concebido para não aderir à ferida ou ao curativo secundário. O ambiente úmido e o efeito refrescante causam uma sensação agradável e calmante aos pacientes.

* Veja instruções de uso para o espectro in vitro

Uso pretendido

- Suprasorb X + PHMB ajuda na cicatrização de feridas e na redução da área de feridas infectadas ou feridas com risco de infecção:
 - ◆ feridas com exsudação leve a moderada
 - ◆ feridas superficiais ou profundas
- Indicações
 - ◆ úlceras arteriais e venosas
 - ◆ úlceras diabéticas
 - ◆ úlceras de decúbito
 - ◆ queimaduras superficiais de segundo grau
 - ◆ feridas pós-operatórias
 - ◆ enxertos de pele
 - ◆ áreas doadoras de enxertos de pele de espessura parcial
 - ◆ abrasões, lacerações


Propriedades

- dependendo das condições da ferida, o Suprasorb X+PHMB libera umidade ou absorve o excesso de exsudato
- cria um ambiente úmido na ferida
- troca de curativos atraumática
- fácil adaptação a qualquer forma ou profundidade da ferida
- particularmente adequado a partes do corpo de difícil tratamento
- o ambiente úmido e o efeito refrescante causam uma sensação agradável e calmante aos pacientes
- ampla eficácia antimicrobiana*

* Veja instruções de uso para o espectro in vitro

Suprasorb® X + PHMB

Regula a umidade nas feridas e reduz micróbios

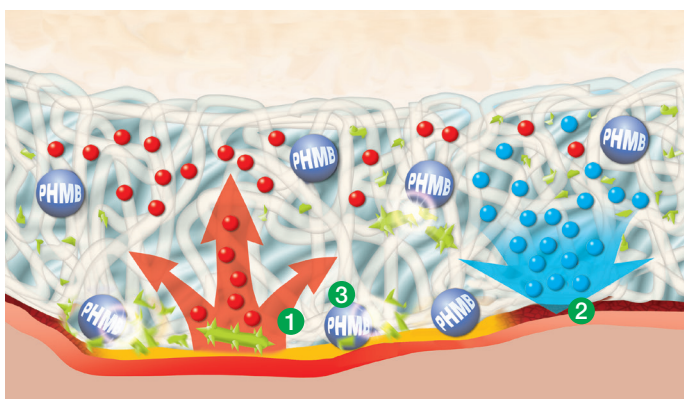

Modo de ação

- 1 O excesso de exsudato drenado da ferida é absorvido pelo curativo.
- 2 O curativo libera umidade à ferida de exsudação leve.
- 3 O polihexametileno biguanida (PHMB) liberado elimina os micro-organismos.

Observação

- Use curativos secundários adequados
- Contate um médico ou enfermeiro se ocorrer o seguinte:
 - ◆ mudança de cor e/ou odor da ferida
 - ◆ cicatrização estagnada
 - ◆ sinais clínicos de infecção
- Não use esse produto em pacientes com intolerância ou alergia conhecida a um ou mais dos componentes.
- O curativo não pretende ser o único tratamento para feridas infectadas, devendo ser complementado por um tratamento farmacológico a critério do médico responsável e de acordo com os protocolos clínicos locais.

Intervalo de troca do curativo

O intervalo de troca do Suprasorb X + PHMB é determinado pelo profissional responsável conforme as condições da ferida.

Composição do produto

- água
- celulose
- 0,3% de polihexametileno biguanida (PHMB/polihexanida)

Suprasorb® X + PHMB

Tamanho (cm)	REF	Unidades de expedição (unid.)
Curativo		
5 x 5	20 540	5 / 90
9 x 9	20 541	5 / 80
14 x 20	20 542	5 / 65
Fita		
2 x 21	20 543	5 / 130



PolarFix
R. Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá - SP
CEP: 09370 - 850
Site: www.polarfix.com.br
TEL: 0 xx 11 4512 - 8600