



Paramentação

Avental Cirúrgico Estéril BVB Barreira Viral

Indicação de uso:


Indicado para proteção dos profissionais em procedimentos cirúrgicos, que exigem uma barreira contra vírus e bactérias de dimensões a partir de 0,027 microns, (inclusive o HBV, HCV e HIV).

Composição:

Confeccionado em trilaminado de polipropileno, com camada de filme respirável e punho em malha.



Mangas Raglan

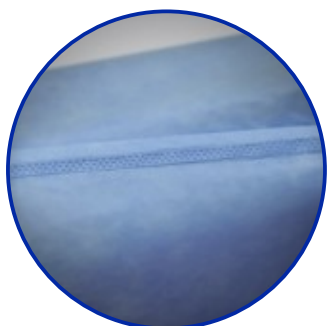

Solda Ultrassônica

Especificação Técnica:

- Tiras na cintura e velcro no pescoço.
- Material respirável, proporcionando mais conforto ao usuário.
- Confeccionado com mangas raglan e por processo de solda ultrassônica.
- Acompanha Toalha para secagem das mãos.
- Cartão TAG de transferência asséptica.
- Embalado individualmente, com dupla embalagem (dobra asséptica)
- Produto estéril.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Embalagem de papel grau cirúrgico e filme hospitalar.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

Validade: 5 anos

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque
F08641	Avental Cirúrgico Estéril BVB Trilaminado Grande	1 Unidade	18 Unidades
F08642	Avental Cirúrgico Estéril BVB Trilaminado Extra Grande	1 Unidade	14 Unidades