



# Wound Care F: Filme Transparente Estéril

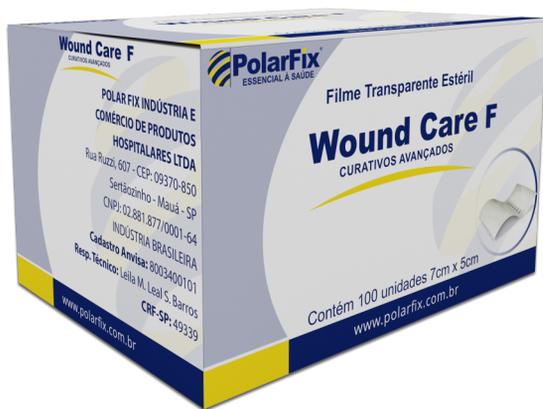

## Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Redução do risco de infecção: a alta permeabilidade aos vapores de água previne o acúmulo de umidade entre a pele e o filme, evitando a proliferação bacteriana e, conseqüentemente, o risco de infecção. Sua impermeabilidade a bactérias permite que o mesmo atue como uma barreira mecânica.
- Minimiza frequência de troca do filme: A alta permeabilidade do filme aos gases e vapores úmidos mantém a pele seca e aumenta a aderência do filme com a pele, o que reduz a frequência de troca.
- Maior conforto do paciente: Composto por um adesivo hipoalergênico e sendo altamente permeável a gases e vapores úmidos, evita maceração e irritações da pele, aumentando o conforto do usuário.
- Visualização da ferida: Sua transparência permite a visualização da evolução da ferida (quando não aplicado sobre uma cobertura primária).

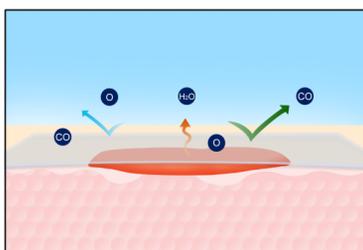


Não permite a passagem de água e bactérias.  
Permite a troca de gases.

**Indicações de uso:** O Filme Transparente Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.

O Filme Transparente Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Feridas superficiais;
- ✓ Proteção de tecido epitelial novo;
- ✓ Curativo secundário para fixação de outros curativos;

**Composição:** Filme: 100% poliuretano, revestido por um adesivo de poliacrilato; Filme de suporte: 100% poliéster, revestido com polietileno em ambos os lados e siliconado em um lado; Papel de cobertura: 100% papel siliconado.

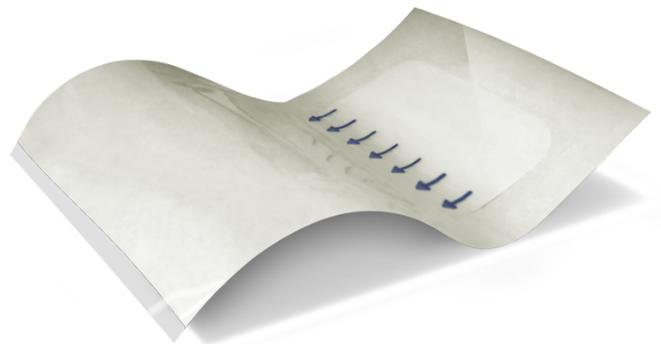

## Filme Transparente Estéril

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
F08573	7 CM x 5 CM	8003400101
F08574	10 CM x 12 CM	8003400101
F08575	10 CM x 25 CM	8003400101
F08576	20 CM x 30 CM	8003400101

Para mais informações

